

# OTObase

## Muster 15- und Arztstempeleinstellungen



OTObase ist ein Datenbank-Modul, das Daten von Patienten schnell, einfach und sicher über eine GDT-Schnittstelle mit dem elektronischen Patiententenenakten in Ihrem Patienten Management System verbindet. Wenn Sie OTObase ohne GDT-Verbindung einsetzen, können Patientendaten manuell eingegeben und verwaltet werden. Die Bedienung ist einfach und intuitiv.

Bei Verwendung über GDT-Verbindung zu Ihrem Patienten Management System öffnet sich, je nach angeforderter Messmethode, OTOSuite mit dem entsprechendem Messmodul (Audiometrie, Impedanz oder OAE) automatisch.

OTObase bietet auch die Möglichkeit ein Muster 15-Formular auszudrucken.

# OTObase – Muster 15

## Grundlagen zur Einrichtung

- Setup - Muster 15-Einstellungen – HNO-Einstellungen

The screenshot shows a software window titled 'Muster 15-Einstellungen' with a close button in the top right corner. It has two tabs: 'Druckoptionen' and 'Stempel/Unterschrift Einstellungen'. The 'HNO-Einstellungen' section is active and contains the following fields:

- A text box for 'Kliniknummer' containing '098970876'.
- A section titled 'HNO-Arztnummerneinstellungen' containing:
  - A text box for 'HNO-Name' containing 'Ohrschmerz'.
  - A text box for 'HNO-Arztnummer' containing '445500927'.

Below the 'HNO-Arztnummer' field is a blue hyperlink: [Klicken Sie hier, um eine Arztnummer hinzuzufügen/zu bearbeiten](#). At the bottom of the dialog are three buttons: 'Standard', 'OK', and 'Abbrechen'.

Kliniknummer ⇔ Betriebsstättennummer  
→ hier kann nur eine Nummer verwendet werden

HNO-Name und HNO-Arztnummer  
→ hier können mehrere hinzugefügt werden

- Setup - Muster 15-Einstellungen – **Stempel/Unterschrift**


Hier kann ein vorhandenes Logo importiert werden

Oder man erstellt einen Stempel 211 Pixel X 111 Pixel mit dem Dateiformat JPEG


# OTObase – Muster 15

## Stempel erzeugen

- In Paint Größe ändern wählen. 211 Pixel X 111 Pixel einstellen
- In der Rubrik Tools A für Texteingabe wählen
- Mit der Maus ein Rechteck als Texteingabefeld über das gesamte Feld markieren
- Bei Schriftart die Schriftart und die Schriftgröße wählen. Mit Arial und Schriftgröße 14 kann man fünf Zeilen in das Texteingabefeld schreiben

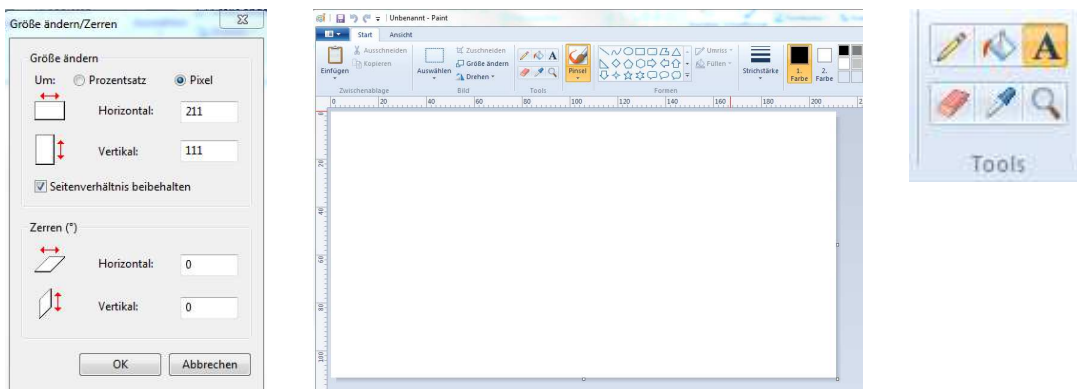

- Die Datei als JPEG-Datei speichern  
z. B. Bibliotheken\Bilder\Stempel\_Muster15.jpg

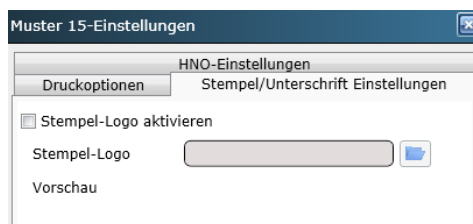

In OTObase – Setup – Muster 15-Einstellungen, Stempel/Unterschrift Einstellungen, Stempel-Logo aktivieren und den Pfad einstellen.

# OTObase – Muster 15

## Adresskopf – Beschreibung

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten Helene Musterfrau <span style="float: right;">geb. am</span> 03.10.1939		
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr. 234678	Status
Betriebsstätten-Nr. 098970876	Arzt-Nr. 445500927	Datum 21.11.2017

### GDT Datensatz zum Aufruf einer Messung

01380006302  
 014810000180  
 01392182.00  
 01030005698  
 0173101Musterfrau  
 0153102Helene  
 017310303101939  
 0173104Titel  
 0158402AUDI00  
 017620020030127  
 017843227012003  
 0158439152021  
 00131083  
 0103105234678

In Felder, die nicht automatisch ausgefüllt werden (hier im Beispiel alle leere Felder), gelangt man per Mausklick und kann manuell ergänzen. Das gilt auch für das gesamte Formular.

**Krankenkasse bzw. Kostenträger**  
Ist nicht Bestandteil des GDT-Standards 2.1

**Name, Vorname des Versicherten**  
GDT 3101 und 3102

**Geb. am**  
GDT 3103

**Kassen-Nr.**  
Ist nicht Bestandteil des GDT-Standards 2.1

**Versichertennummer**  
GDT 3105

**Betriebsstättennummer (Kliniknummer)**  
Nur eine

**Arztnummer**  
Mehrere

**Datum**  
Datum der Berichtserstellung (Muster 15)

## Copyright Hinweise

Die Inhalte dieses Handbuches und/oder des Programmes unterliegen dem Copyright und Urhebergesetz und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die GN Otometrics GmbH weder ganz, noch auszugsweise veröffentlicht, oder in jeglicher Form versendet, abgespeichert oder vervielfältigt werden.

Copyright© 2017, GN Otometrics GmbH

Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in diesem Handbuch basieren auf den aktuellen Produktinformationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. GN Otometrics A/S & GN Otometrics GmbH haben das Recht Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Technischer Support

E-Mail: [service-de@otometrics.com](mailto:service-de@otometrics.com) Tel: +49 (0) 251 203 983 9922

Wichtig!

Für umfassende Informationen bezüglich der Sicherheit im Umgang mit dem betreffenden Produkt lesen Sie bitte das entsprechende Benutzerhandbuch. Es enthält Informationen und Sicherheitshinweise, welche für einen sicheren Umgang mit dem Produkt benötigt werden.

Sie haben Interesse an einer Intensivschulung für sich und Ihr Team? Bei Fragen und Angebotswünschen kontaktieren Sie bitte:

Günter Engelhard, Produktspezialist / Trainer HNO  
E-Mail: [gengelhard@otometrics.com](mailto:gengelhard@otometrics.com)  
Mobil: +49 (0) 172 83 27 811

Julia Klenovits, Seminarorganisation  
E-Mail: [fortbildung@otometrics.com](mailto:fortbildung@otometrics.com)  
Tel: +49 (0) 251 203 983 916

Weitere Workshoptermine finden Sie unter:

<http://www.otometrics.com/de-DE/wissen/seminare>



[facebook.com/Otometrics.HNO.de](https://facebook.com/Otometrics.HNO.de)



[youtube.com/otometricsTV](https://youtube.com/otometricsTV)

Otometrics, Deutschland. Tel.:0251 203 983-0. Fax: 0251 203 983 999  
[www.otometrics.de](http://www.otometrics.de) [info-de@otometrics.com](mailto:info-de@otometrics.com)